

2026_KC_GRP_002

Wat zijn de voordelen van KELO-COTE® ?

Er zijn heel wat kenmerken en voordelen aan het gebruik van **KELO-COTE®**, waardoor het makkelijk is om je littekens te laten vervagen. (3)

- Helpt littekens **zachter en vlakker** te maken
- **Klinisch bewezen formule** (2)
- **Vermindert roodheid,** verlicht **jeuk en ongemak**
- Geschikt voor **kinderen en volwassenen** (vanaf 3 maanden voor UV en gel)
- **Transparant en geurloos** (niet-UV producten)
- **Flexibel en waterbestendig,** met **24 uur bescherming**
- Kan **onder make-up** gebruikt worden
- Ook verkrijgbaar als **SPF 30 gel**

Medisch hulpmiddel, uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken bij allergie voor een van de bestanddelen van KELO-COTE® Gel. Vermijd direct contact met de ogen, slijmvliezen, derdegraads brandwonden en open wonden. KELO-COTE® Gel mag niet worden gebruikt bij huidaandoeningen die de integriteit van de huid aantasten. In geval van irritatie, het gebruik stopzetten en een arts raadplegen

KELO·COTE® PREVENTIE & BEHANDELING VAN LITTEKENS

(1) GOLD MH et al. Dermatol Surg 2014;40:825-831
(2) Sepehrmanesh, M. (2006) Scar Management: Observational study of 1522 patients using Kelo-Cote® Silicone Gel. Komp Detmatologie. 1; 30–32
(3) Kelo-Cote® bijsluiter.

KELO·COTE®

PREVENTIE & BEHANDELING VAN LITTEKENS

AANBEVOLEN DOOR PLASTISCH CHIRURGEN (1)



BIOCODEX Benelux

Heb je een ongewenst litteken?

Als dat zo is, ben je niet de enige-littekens komen heel vaak voor. De meeste mensen hebben ergens op hun lichaam een litteken.

KELO-COTE® Littekenbehandeling is klinisch bewezen om verheven littekens **zachter**, **vlakker** en **gladder** te maken.

Deze geavanceerde formule vermindert ook verkleuring, roodheid en het jeukende of ongemakkelijke gevoel dat met littekens gepaard kan gaan, veroorzaakt door[2] :




Chirurgie

Hypertrofische littekens kunnen ontstaan na een operatie. **KELO-COTE®** heeft zijn doeltreffendheid aangetoond op verheven en/of roodachtige littekens.[2]



Keizersnede

Een keizersnede laat vaak een licht verheven litteken achter. Als je een litteken wilt behandelen, kan een siliconengel zoals **KELO-COTE®** helpen.

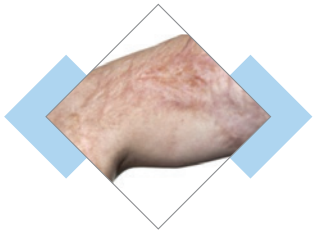

Brandwonden


Ernstige brandwonden kunnen littekens veroorzaken. **KELO-COTE®** is geschikt voor gevoelige littekens zoals brandwonden.



Cosmetische chirurgie

Als je een cosmetische ingreep hebt gehad of overweegt, bespreek dan de klinisch bewezen formule van **KELO-COTE®** met je chirurg.

Hoe gebruik je KELO-COTE® ?

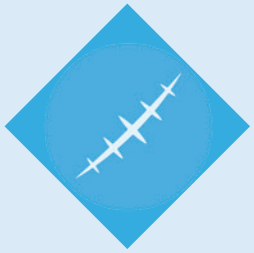

Start de behandeling zodra de wond gesloten is en de **hechtingen verwijderd** zijn. Zorg dat het gebied schoon en droog is.



Breng een **zeer dunne laag KELO-COTE®** aan op het litteken, **tweemaal per dag**. Niet inmasseren.



KELO-COTE® droogt vanzelf binnen **5 minuten** en vormt een flexibele, transparante, **waterbestendige laag**. Verwijder overtollig product als het niet volledig opdroogt. Zodra het droog is, kun je **zonnecrème of make-up** aanbrengen.



De **aanbevolen minimale behandeltijd** is **60 tot 90 dagen**. Indien verbetering nog zichtbaar is na 90 dagen, wordt aangeraden de **behandeling voort te zetten**.


Hoe werkt KELO-COTE® ?

De **siliconengel tegen littekens KELO-COTE®** droogt binnen **5 minuten** na het aanbrengen en vormt een **ademende**, **waterbestendige laag** over het getroffen gebied - als een **tweede huid**.

Deze onzichtbare siliconenlaag hecht zich aan de buitenste laag dode huidcellen en **beschermt het onderliggende weefsel** tegen chemische en fysieke invloeden van het litteken.

De siliconenlaag helpt de huid **gehydrateerd te houden** en creëert een omgeving die een **normale collageenproductie** ondersteunt.

Voor gebruik van KELO-COTE®

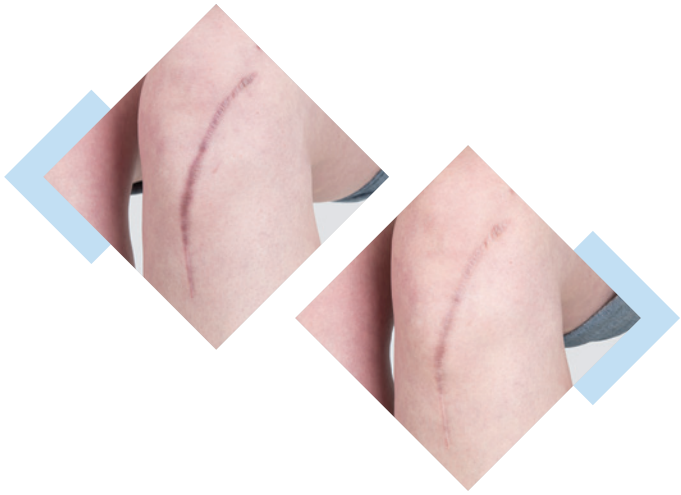

Na 90 dagen gebruik van KELO-COTE®

KELO·COTE®
PREVENTIE & BEHANDELING VAN LITTEKENS

KELO·COTE®
PREVENTIE & BEHANDELING VAN LITTEKENS